

ДЕЗИНФЕКЦИЯ В МЕДИЦИНЕ



ПРОГРАММА ДЕЗИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

■ ПОВЕРХНОСТИ и ОТХОДЫ

	Абсолю- цид ОКСИ	Абсолю- цид ФОРТЕ	АБСОЛЮ- ПОЛ	Жавель АБСОЛЮТ
Поверхности, посуда, мебель, ген.уборка	+	+	+	+
Медицинские и биоотходы (класс)	А, Б	А, Б	А, Б, В	А, Б, В
Санитарный транспорт	+	+	+	+
Системы вентиляции	+			
Очаги особо опасных инфекций	+			+
Анаэробные инфекции				+

ПРОГРАММА ДЕЗИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

■ ИНСТРУМЕНТ И ИМН

	Абсолю- цид ОКСИ	Абсолюцид ФОРТЕ	АБСОЛЮ- ПОЛ	Абсолю- цид НУК	Жавель АБСОЛЮТ
Стерилизация		+		+	
ДВУ эндоскопов		+		+	
Дезинфекция с ПСО	+	+	+	+	+
Предстерилиза- ционная очистка	+	+	+		

ПРИНЦИП ТРЕХ «Э».

■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

■ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

■ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

АБСОЛЮЦИД®

ОКСИ



Дезинфицирующее средство
на основе активированной перекиси водорода

■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, вкл. туберкулез, полиомиелит, ООИ (в т.ч. споры сибирской язвы)
- ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СРЕДИ ГРУППЫ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
- ПРЕПАРАТ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 - ✓ до 10 раз с добавлением до 40% (!) инаktivированной сыворотки (по данным ЦНИИ эпидемиологии Минздрава РФ)

АБСОЛЮЦИД®

ОКСИ



Дезинфицирующее средство
на основе активированной перекиси водорода

■ ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

■ В СРАВНЕНИИ С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

- ✓ Стоимость обработки поверхностей дезсредством «АБСОЛЮЦИД окси» более чем в 2 РАЗА НИЖЕ чем перекисью водорода

■ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ГРУППАМИ ДЕЗСРЕДСТВ

- ✓ Стоимость обработки средством «АБСОЛЮЦИД окси» находится на уровне хлорсодержащих препаратов (!) и лучших по экономичности средств на основе ЧАС.

АБСОЛЮЦИД®

ОКСИ



Дезинфицирующее средство
на основе активированной перекиси водорода

■ «АБСОЛЮЦИД окси»

или ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА ?

	АБСОЛЮЦИД окси	ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
Транспортировка	Без ограничений	Спецтранспорт
Коррозионная активность	Низкая	Высокая
Пожароопасность	Отсутствует	Высокая
Стоимость обработки	0,30 руб./кв.м.	0,80 руб./кв.м.
Многократность использования	До 10 раз	Отсутствует

АБСОЛЮЦИД окси

Стоимость обработки 1 кв.м. Бактериальные инфекции
(экспозиция 60 минут, кроме туберкулеза)

Препараты	кислородсодержащие				хлорсодержащие		на основе ЧАС	
	АБСОЛЮ- ЦИД окси	Перформ (ФРГ)	Экоцид (Слове- ния)	Перекись водорода медиц., 30%	Хлора- мин Б	Жавель- он	Алами- нол	Дез- эффек- т
Цена 1л(кг) концетрата,руб	590	1600	1224	43	275	510	180	488
Концентрация раб.раствора, %	0,5	2,0	2,00	3,0	0,75	0,03	1,0	0,8
Цена 1л раб.раствора, руб	2,95	32,04	24,50	4,00	2,07	0,16	1,81	3,90
Цена обработки 1кв.м. поверх- ности, руб	0,30	3,20	2,45	0,80	0,31	0,02	0,27	0,39

АБСОЛЮЦИД окси

Стоимость обработки 1 кв.м. Вирусные инфекции
(экспозиция 60 минут, включая гепатит Б)

Препараты	кислородсодержащие				хлорсодержащие		на основе ЧАС	
	АБСОЛЮЦИД окси	Перформ (ФРГ)	Экоцид (Словения)	Перекись водорода медиц., 30%	Хлорамин Б	Жавельон	Аламинол	Дез-эффект
Цена 1л(кг) концентрата,руб	590	1600	1224	43	275	510	180	488
Концентрация раб.раствора, %	2,0	2,0	2,0	6,0	2,5	0,14	5,0	2,3
Цена 1л раб.раствора, руб	11,80	32,04	24,50	8,00	6,90	0,72	9,03	11,20
Цена обработки 1кв.м. поверхности, руб	1,18	3,20	2,45	1,60	1,03	0,07	1,36	1,12

АБСОЛЮЦИД®

ОКСИ



Дезинфицирующее средство
на основе активированной перекиси водорода

■ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- РАБОЧИЙ РАСТВОР БЕЗ ЗАПАХА и ОТДУШЕК
- РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ
- НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА, АЛЬДЕГИДОВ, ФОСФАТОВ
- НЕ ОБЛАДАЕТ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ И КУМУЛЯТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
- ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПРЕПАРАТ, РАЗРЕШЕННЫЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУВЕЗОВ

АБСОЛЮЦИД®

ОКСИ



Дезинфицирующее средство
на основе активированной перекиси водорода

■ **УДОБНАЯ
УПАКОВКА**

■ **ФОЛЬГА-
ПАКЕТИКИ ПО 50гр**



®

форте



**■ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ ИМН, ДВУ И
СТЕРИЛИЗАЦИИ**

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО – КОМБИНАЦИЯ ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА и ЧАС

АБСОЛЮЦИД[®]

форте

■ ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОН ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА

- АКТИВАЦИЯ, в том числе ЧАСами
- МИНИМИЗАЦИЯ КОНТАКТА ПЕРСОНАЛА С ПРЕПАРАТАМИ
- ИСКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВА РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

АБСОЛЮЦИД®

форте

■ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

■ **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ РАБОЧИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ**

	Холодная	С нагревом
Стерилизация	4% 90мин	2% 90мин
ДВУ	6% 5мин	2% 5мин
Дезинфекция ИМН	0,4% 90мин или 2% 15мин	--

■ **СТОИМОСТЬ 1л РАБ. РАСТВОРА**

- ✓ **ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ – 20 руб.**
- ✓ **ДЕЗИНФЕКЦИИ ИМН – 10 руб.**

®

форте

■ УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ



■ МИНИМИЗИРОВАН КОНТАКТ ПЕРСОНАЛА С ПРЕПАРАТОМ

✓ **ОСНАЩЕН ВЫСОКОТОЧНЫМ
ДОЗАТОРОМ ПРОИЗВОДСТВА КАНАДА**

✓ НА УПАКОВКЕ МЕРНАЯ ШКАЛА и ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

®



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО - КОМПЛЕКС ЧАС_{ОВ}

АБСОЛЮПОЛ®

■ ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ АБСОЛЮПОЛ ?

■ НИЗКИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ,

- ✓ Генеральная уборка – 0,1% 60 минут.

■ КОТОРЫЕ ЛЕГКО ПРИГОТОВИТЬ

- ✓ Высокоточный дозатор производства Канада и дозировочная шкала на упаковке

■ ЭКОНОМИЧНО, НО НАДЕЖНО

- ✓ Генеральная уборка – 6 копеек / кв.м.


■ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ

■ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Жавель АБСОЛЮТ

300

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ

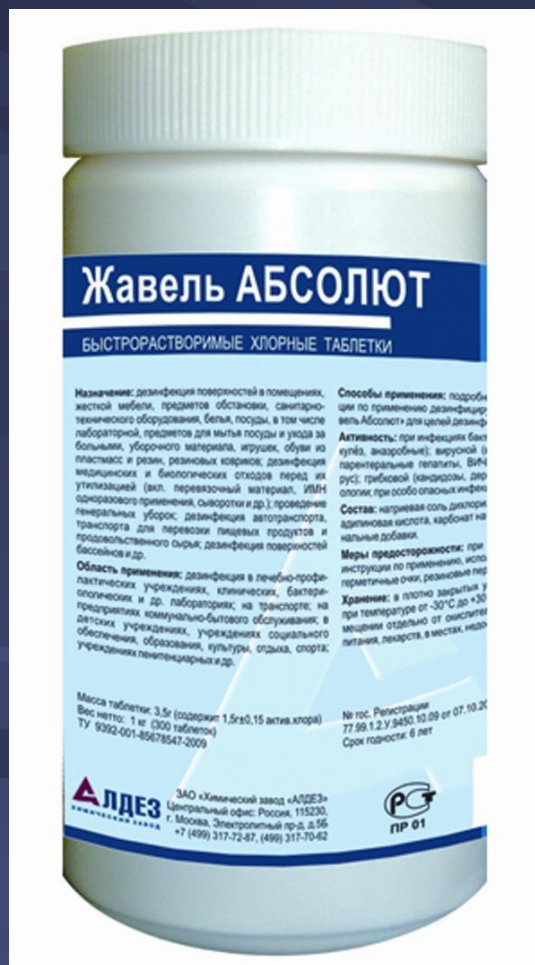

■ БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО -
ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ
КИСЛОТА 84%

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ

■ ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ЖАВЕЛЬ АБСОЛЮТ ?

- ЦЕНА 1 БАНКИ (300 ТАБЛЕТОК) - от 290 руб.,
- ПО КАЧЕСТВУ НЕ УСТУПАЕТ ЛУЧШИМ ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ
 - ✓ Минимально возможный запах
 - ✓ Великолепно растворяется благодаря наличию адипиновой кислоты и бикарбоната натрия
- РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
- РЕКОМЕНДОВАН ПРОТИВ ОСОБО ОПАСНЫХ И АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИЙ

АБСОЛЮЦИД®

НУК



- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ, ДВУ И ДЕЗИНФЕКЦИИ.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО -
НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА

АБСОЛЮЦИД®

НУК

■ 3 ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ ПО СПОСОБУ ПОЛУЧЕНИЯ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (НУК):

1 ГРУППА. ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ. СМЕШЕНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ (Клиндезин окси, Альфадез окси, Деланокс)

2 ГРУППА. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ. СМЕШЕНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ (Сайдекс НУ)

3 ГРУППА. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ. ПЕРГИДРОЛИЗ СОЕДИНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ РАДИКАЛЫ АЦЕТИЛА (Абсолюцид НУК, Аниоксид 1000, Гигасепт ПА)

АБСОЛЮЦИД®

НУК

- **АБСОЛЮЦИД НУК – первый и пока единственный отечественный препарат, полученный с использованием радикалов ацетила**
- **Стоимость препарата и рабочих растворов в 1,5 раза ниже зарубежных конкурентов**

АБСОЛЮЦИД®

НУК

■ УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СВОЙСТВ АБСОЛЮЦИД НУК

- СРОК ХРАНЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО РАБОЧЕГО РАСТВОРА – 60 СУТОК
- СОХРАНЯЕТ СВОЙСТВА ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ
- pH РАБОЧЕГО РАСТВОРА – 7,0
- СРОК ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТА – 2 ГОДА.

АБСОЛЮЦИД®

НУК

■ РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

	Экспозиция при +20°C
Дезинфекция ИМН (вкл. микобактерии туберкулеза)	5 минут
ДВУ эндоскопов	5 минут
Стерилизация	20 минут



телефоны: +7 (495) 972-14-36, +7 (495) 972-11-68;

факс: +7 (495) 462-92-73;

мобильный телефон: +7 (916) 477-12-21